



BRUKSANVISNING

Terahertz våggenerator

Terastim UniversalTM


Terastimserien är ett naturligt sätt att aktivera kroppens egna resurser.

Människans Resurser AB


Terastim Universal

Cell aktivator

Terastim Universal är en hälsofrämjande apparat som är baserad på infraröd värme och supersvaga terahertzvågor (här är en separat beskrivning av terahertzvågor www.terastim.com). Terahertzvågor förbättrar blodkärl, vidgar dem och gör dem mer elastiska, vilket förbättrar blodcirkulationen. Och tack vare terahertzvågornas goda genomträngningsförmåga så förbättras mikrocirkulationen i kroppens olika organ och vävnader.

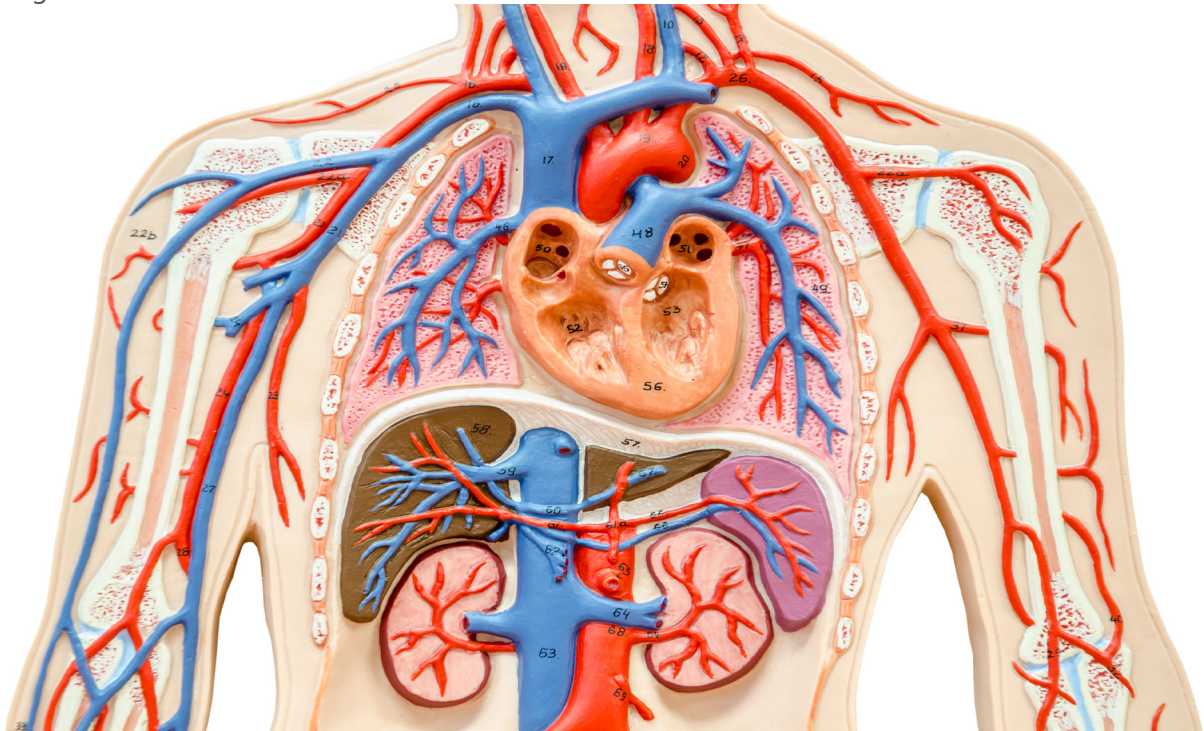

Den infraröda uppvärmningen stärker vårt immunförsvar då de celler som bekämpar hälsoproblem kan agera snabbare vid en infektion. Denna kombination gör det möjligt att förbättra hälsa på ett enkelt och effektivt sätt.

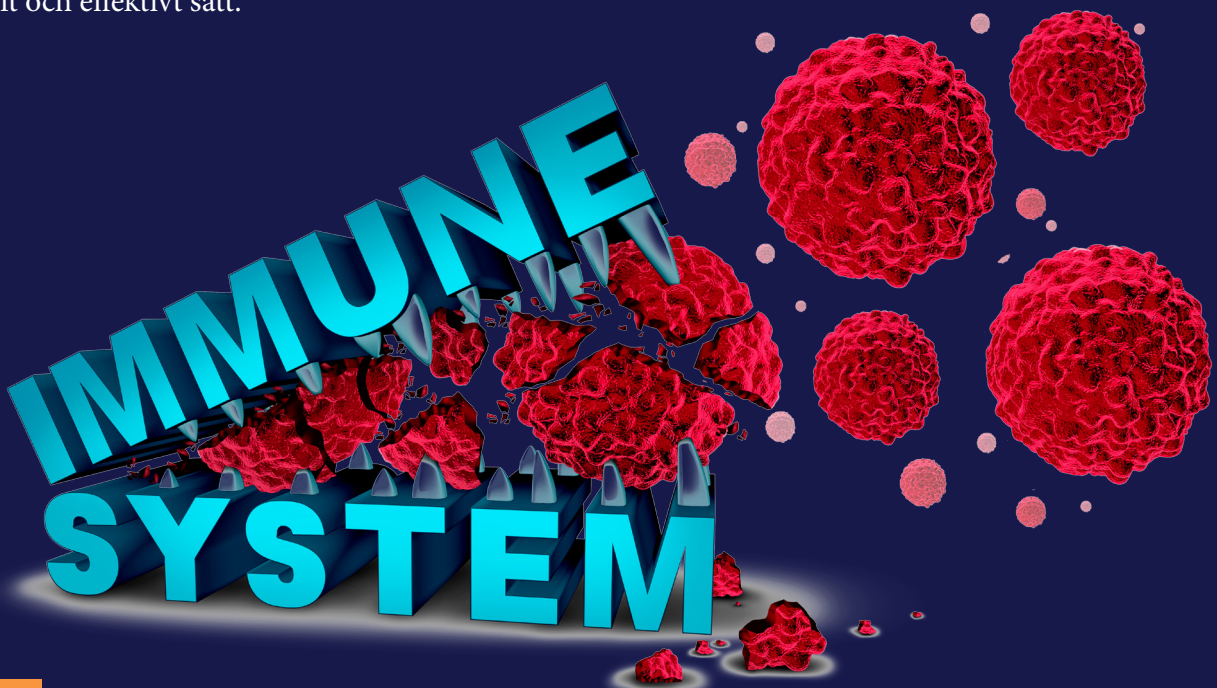

ANVÄNDNING

Du använder apparaten genom att hålla den mot olika zoner i kroppen och på ställen dit du vill rikta värme med terahertzvågor. Avstånd från kroppen ska vara 4-5 cm. Behandlingen kan fungera genom kläder om kläderna är av 100 % bomull eller 100 % ull.

Apparaten har 3 lägen



Läge 1 - Stark blås av terahertzvågor och lägre temperatur

Läge 2 - Mindre blås av terahertzvågor och lägre temperatur

Läge 3 - Stark blås av terahertzvågor och högre temperatur

Läge 1 används vid behandling av genitalierna, händerna och fötterna

Läge 2 används vid behandling av hjärnan, ansiktet, halsen, öronen, sköldkörtel och lymfkörtlar

Läge 3 används vid behandling av alla inre organ, leder och ryggraden

Läge 1 används 5 min. 2 ggr om dagen

Läge 2 används 5 min. 2 ggr om dagen.

Läge 3 används 10 min. 1 gång om dagen

Allmän behandlingstid per session får inte överstiga 30 min. Allmän behandlingstid per dag får inte överstiga 1 timme.


Efter 10 dagars användning gör man 2 dagars paus.

HUVUD ZONER

Apparaten kan användas på de allmänna zoner som visas på bilderna för att stärka och rensa kroppen samt på lokala kropps problem.


Ryggraden

Läge 3,
10 min

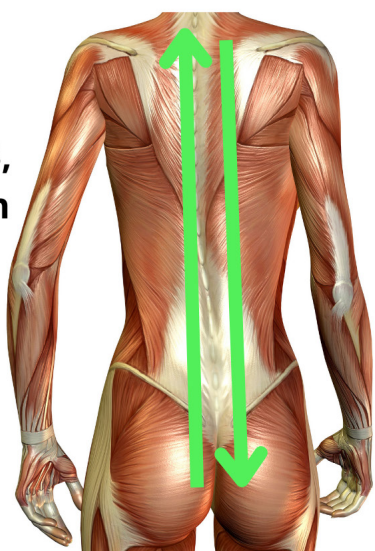

Lymfkörtlar


Läge 2,
5 min

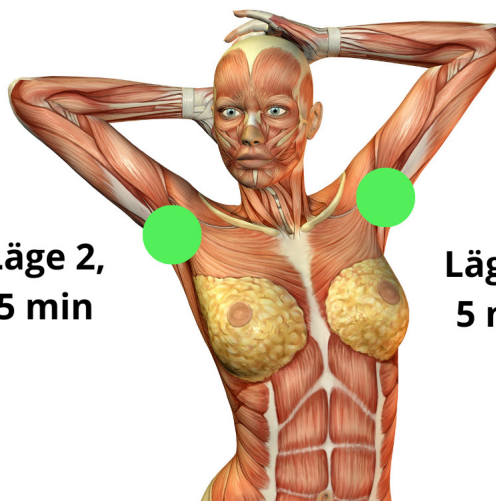

Läge 2,
5 min

Axlar

Läge 3,
10 min

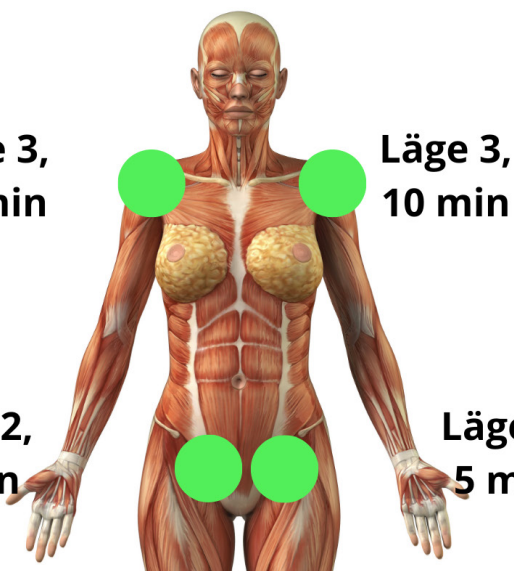


Läge 3,
10 min

Läge 2,
5 min

Läge 2,
5 min

Ansikten

Läge 2,
5 min


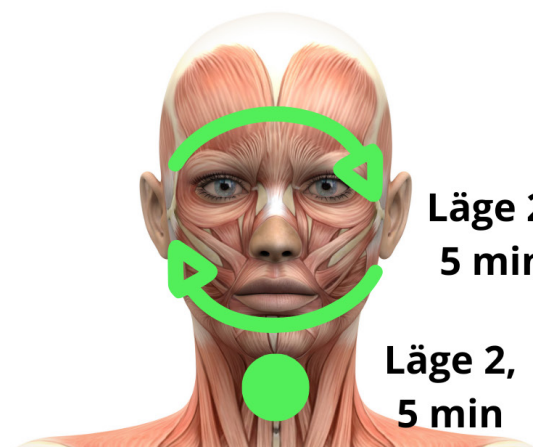


Läge 2,
5 min

Lymfkörtlar

Skötkörtel

Lungorna

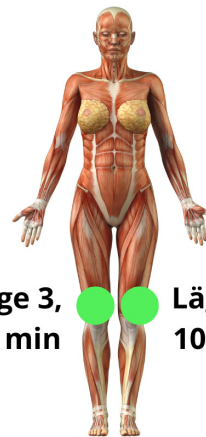
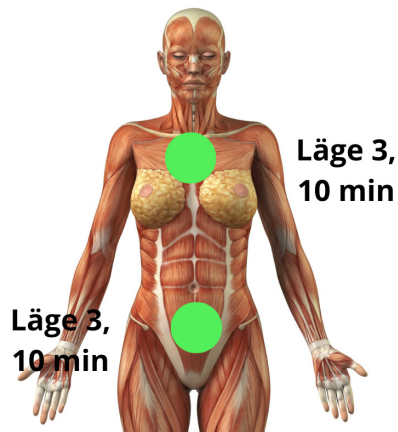


Urinblåse, könsorgan

Knä

Händer

Fötter

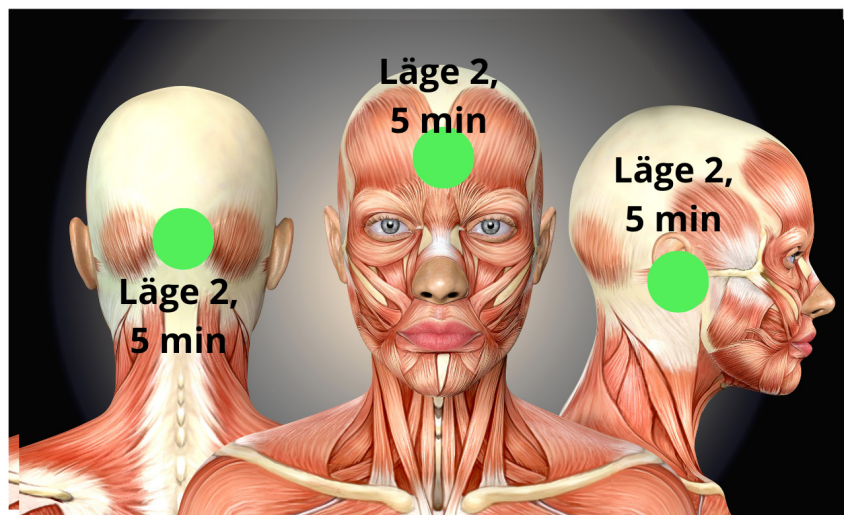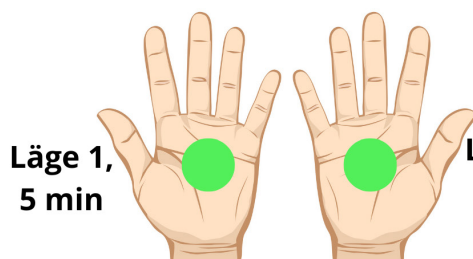

Backhuvudet

Panna

Öron

Extra rekommendationer

1. Innan du använder enheten rekommenderas att du dricker ett glas vatten
2. Om det känns för varmt vid användning av enheten, så kan du öka avståndet från kroppen upp till 15 cm.

Kontraindikationer: Apparaten ska inte användas av gravida kvinnor eller människor med pacemaker. Man får inte blåsa på öppet sår eller i öppna ögon.

Apparatens tekniska parametrar: 220-250 v, 50/ 60 Hz , Power 750 w.

Garanti - 1 år.

Kontakta oss

Människans Resurser AB



Byängsgränd 14, tr 3,
120 40 Årsta



mail@mr-ab.se
www.terastim.com



08 334908